


Mi Electric Toothbrush Uživatelský manuál




1. Přehled produktu

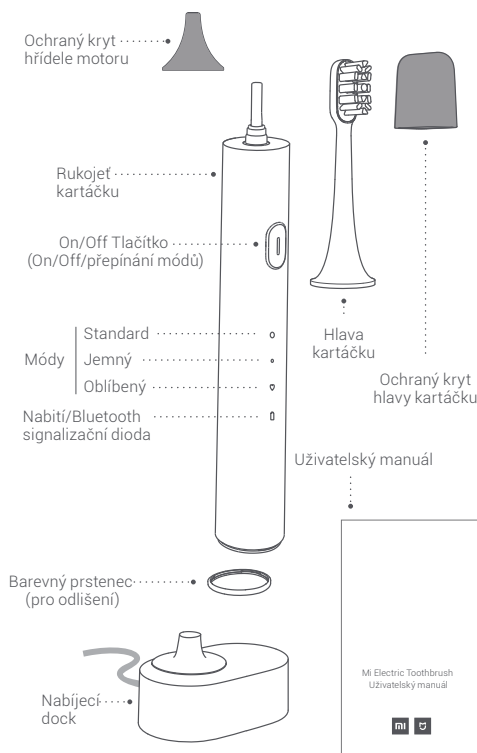

b. Instalace a výměna barevného prstence

- Vyměňte barevný prstenec na jakoukoli barvu
- Odstranění barevného prstence: Držte zubní kartáček levou rukou, stiskněte levou rukou (texturovanou) zadní část zubního kartáčku, stiskněte pravým ukazováčkem proti vzduchovému otvoru v dolní části, vložte nehet do mezery mezi barevným kroužkem a rukojetí, zatlačte barevný kroužek směrem nahoru a trochu ho vysuňte.
- Instalace barevného kroužku: Udržujte barevný kroužek klouby směrem dolů a spojte jej se třemi klouby na rukojeti. Stisknutím barevného kroužku dolů jej nainstalujte.

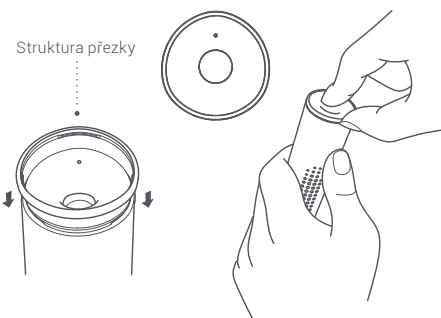

c. Vymáčkněte zubní pastu

Navlhčete hlavu kartáčku a vymáčkněte přiměřené množství zubní pasty na hlavu kartáčku.



Bezpečnostní opatření

⚠Poznámka

Můžete pociťovat svědění nebo lehké krvácení při prvním použití. To je způsobeno tím, že dásně nejsou zvyklé na takto efektivní čištění. Je doporučováno používat ♥ oblíbený mód kartáčku. Tento symptom většinou zmizí po 1-2 týdnech. Pokud trvá déle jak 2 týdny, tak přestaňte používat kartáček a navštivte svého zubaře.

• Varování

1. Uživatelé, kteří podstoupí ortodontii, zubní opravu nebo zubní implantát, by měli produkt používat pod vedením zubních lékařů.
2. Mi Electric Toothbrush splňuje bezpečnostní normy pro elektromagnetické zařízení. Pokud máte jakýkoliv pochybnosti o kardiostimulátorech nebo jiných implantovaných zařízeních, poraďte se s lékařem nebo výrobcem implantovaných přístrojů před použitím.
3. Tento výrobek je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyk. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu. Pokud máte pocit nepohodlí nebo bolesti, okamžitě přestaňte používat tento výrobek a konzultujte používání výrobku s lékařem.

• Zákazy

1. Nabíjecí dock neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
2. Po čištění zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka nabíjecí základny zcela suchá, poté zapojte do napájecího zdroje.
3. Tento výrobek obsahuje zabudované nabíjecí baterie. Nevhazujte výrobek do ohně, nenabíjejte, nepoužívejte jej ani jej neumísťte do prostředí s vysokou teplotou.
4. Nepokoušejte se produkt modifikovat, rozebírat nebo opravovat.

• Důležité

1. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej.
2. Před zapojením do napájecího zdroje zkontrolujte, zda je místní napájecí zdroj v souladu s požadovaným napětím vyznačeným na výrobku.
3. Pokud dojde k poškození nabíjecího doku, nepoužívejte jej.
4. Pokud výrobek (včetně rukojeti a hlavy zubního kartáčku) vykazuje nějaké známky poškození, přestaňte jej používat.
5. Nepoužívejte nabíjecí dock v prostředí s vysokou teplotou (např. při vystavení slunci).
6. Nepoužívejte zubní kartáček během koupání nebo sprchování.

• Rady

1. Nesdílejte hlavičku zubního kartáčku s ostatními.
2. Neobtáčejte napájecí kabel kolem nabíjecího doku, pokud je připojen k napájecímu zdroji.
3. Neumísťte kovové předměty do nabíjecího doku, pokud je připojen k napájecímu zdroji.


2. Jak používat kartáček

Tip:

Můžete pociťovat svědění nebo lehké krvácení při prvním použití. To je způsobeno tím, že dásně nejsou zvyklé na takto efektivní čištění. Je doporučováno používat ♥ oblíbený mód kartáčku. Tento symptom většinou zmizí po 1-2 týdnech. Pokud trvá déle jak 2 týdny, tak přestaňte používat kartáček a navštivte svého zubaře.

a. Instalace hlavy kartáčku

Upevněte hlavu zubního kartáčku na rukojet zubního kartáčku a nechte prostor pro určitou mezeru mezi oběma částmi. (Mezera zajišťuje, aby se hlava zubního kartáčku nepříšla do styku s tělem zubního kartáčku během vysokofrekvenčních vibrací)

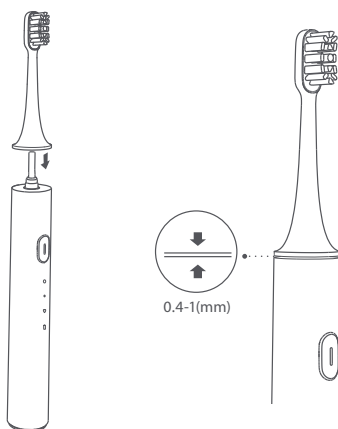

d. Vyberte mód



On/Off/přepínání módů

- Zapnutí: Krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí.



- Přepínání módů: Pokud je zařízení zapnuto, stiskněte znovu pro přepnutí módu.



- Pauza: stiskněte tlačítko na 1 vteřinu pro pauzu. Pokud 30 vteřin nebudete pokračovat v čištění, tak se zařízení samo vypne.



- Vypnutí: Pokud je zařízení zapnuto přepněte do oblíbeného ♥ módu a poté znovu přepněte mód pro vypnutí kartáčku.




- V případě zvláštních podmínek, stiskněte a držte tlačítko na 12 vteřin pro obnovení továrního nastavení.

(Aby nedošlo k chybě dat, tak synchronizujte data s mobilním telefonem pomocí Bluetooth)

e. Čistě si zuby zdravě

- Pomalu pohybujte kartáčkem pod úhlem 45° mezi kartáčkem a dásněmi.
- Při čištění zubů je možné libovolně stisknout On/Off tlačítko pro přepnutí módu.
- Během čištění kartáček přestane vibrovat každých 30 vteřin, aby Vás upozornil na změnu čistící pozice.
- Pokud kartáček aktivně nezastavuje vibrace, tak se automaticky vypne při dokončení čistícího módu (čistící mód může být zvolen v aplikaci).

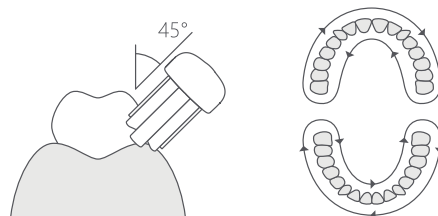


f. Čištění hlavy kartáčku

- Po čištění opláchněte hlavu kartáčku pod tekoucí vodou.
- Po dokončení čištění zubů přikryjte hlavu kartáčku ochranným krytem, aby se hlava kartáčku udržela hygienicky čistá.



FDA Testování jídla a léků

- Akrylonitrilové kopolymery a pryskyřicové části byly testovány v souladu s U.S.F.D.A C.F.R.21. Část 180.22 a 181.32; Nylonové pryskyřice byly testovány v souladu s U.S.F.D.A C.F.R.21. Část 177.1500.

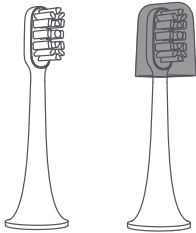


* Je doporučeno vyměnit hlavu kartáčku každé 3 měsíce.

g. Nabíjejte kartáček pravidelně

- Po připojení nabíjecího docku do sítě může indikátor napájení zubního kartáčku zobrazit různé efekty:

100%: Stálé modrozelené světlo
100% - 60%: Bliká modrozeleně
60% - 20%: Bliká oranžově
<20%: Bliká červeně

- Trvá déle než 12 hodin, dokud se baterie zcela nenabije (indikátor baterie bliká červeně).
- Pokud je spojení Bluetooth úspěšné během nabíjení, indikátor napájení / Bluetooth blikne třikrát a připojení Bluetooth je zachováno. Po odstranění připojení Bluetooth se obnoví účinek indikace nabíjení.

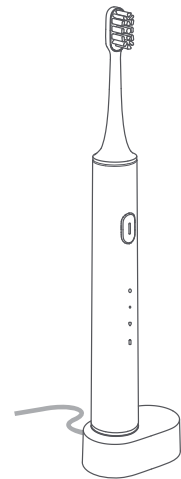

- Bluetooth připojeno: modrá
- 100%: svítí modrozeleně
- 100%-60%: bliká modrozeleně
- 60%-20%: bliká oranžově
- 20%-0%: bliká červeně

Stažení aplikace Mi Home

a. Rychlé nastavení

Kontrolujte, svá zařízení a propojte je s ostatními chytrými zařízeními v Mi Home aplikaci.

1. Stažení a instalace Mi Home aplikace.

Naskenujte QR kód nebo aplikaci stáhněte v App store.



2. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Mi Home a stiskněte "+" vpravo nahoře a pokračujte podle aplikace pro přidání Vašeho zařízení.

b. Připojení aplikace Mi Home

1. Povolte funkci Bluetooth na smartphonu a držte kartáček blízko vašeho smartphonu.
 2. Otevřete aplikaci Mi Home, klepnutím na "+" vpravo nahoře vstoupíte na stránku pro výběr zařízení.
 3. Vyhledejte a zvolte "Mi Electric toothbrush" a dostanete se na stránku spojení.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 vteřiny, Bluetooth Indikátor třikrát blikne a začne svítit a pak zhasne, poté se zařízení zobrazí na domovské stránce, pokud je úspěšně připojeno.
- * Zubní kartáček nefunguje během připojení Bluetooth. Bluetooth není možné připojit, když zubní kartáček pracuje.

c. Synchronizace dat

Stáhněte si Mi Home App, registrujte Mi account, a přihlašte se k Vašemu účtu. Zvolte "Moje zařízení" a přidejte zařízení do seznamu zařízení.



d. Zobrazení přehledů a nastavení funkcí

- Přepněte do ♥ oblíbeného režimu.
- Zobrazí se údaje o čištění a zprávy o analýze.
- Zobrazte zbývajících dnů do výměny hlavy zubního kartáčku.

Ochrana životního prostředí

Dobíjecí lithiové baterie uvnitř produktu mohou obsahovat znečišťující látky. Před vyřazením výrobku nebo jeho uvedením do rekultivačního skladu určeného vládou nezapomeňte baterie vyjmout a odeslat je do určeného rekultivátoru. Pokud se baterie nepodaří vyjmout, můžete je poslat zpět do servisního střediska Mi. Pracovníci servisních středisek vyjmou baterie a zlikvidují je ekologicky.

Specifikace

Rukojeť kartáčku

Jméno: Mi Electric Toothbrush
Model: DDYS01SKS
Voltáž: 3.7 V $\approx$ 0.55 A
Napětí: 2 W
Čas nabíjení: přibližně 12 hodin
IP: IPX7
Bluetooth 4.0
Frekvence: 2402-2480 MHz
Maximální výstupní výkon RF: 0 dBm
Bezdrátové nabíjení
Rozsah frekvence: 483.85 KHz

nabíjecí dock

Režim nabíjení: indukční nabíjení
Typ: bezpečně uzavřený typ nabíjecího doku
Hodnocení IP: IPX7
Vstup: 5 V $\approx$ 0.5 A
Vyrobeno v Číně

* Rady:

1. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce o používání spotřebiče bezpečným způsobem a byly srozuměny s nebezpečím při používání.
2. Mějte děti během používání pod dohledem, aby si se zařízením nehráli.
3. Pokyny pro přístroje třídy III uvádějí, že musí být dodávány pouze u firmy SELV.
4. Zubní kartáčky mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl pod dohledem nebo výukou týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumět daným rizikům.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina
Zařízení nelze zapnout	Zařízení se nabíjí; Zařízení je připojeno přes Bluetooth; Baterie je málo nabitá.
Kartáček není možné usadit na nabíjecí dock	Otvor na spodní straně kartáčku je blokován; Zubní pasta nebo jiné látky se dostaly na dock; Kartáček není originální Mi Electric Toothbrush.
Spotřeba energie je rychlá a zařízení musí být často nabíjeno.	Přístroj je připojen přes Bluetooth po dlouhou dobu; Zařízení je velmi často používáno.
Vibrace hlavy kartáčku jsou slabé	Hlava na zubní kartáček není instalována správně; Cizí předměty se nacházejí mezi hlavou zubního kartáčku a rukojetí zubního kartáčku.
Aplikace nelze připojit k zubnímu kartáčku	Bluetooth je vypnuto; Zubní kartáček není v dostatečné vzdálenosti; Kartáček je ve stavu vibrování.

Přečtěte si pečlivě tento manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, GARMIN, HUAWEI, HONOR, KEN XIN DA,OUKITEL,ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, GARMIN, HUAWEI, HONOR, OUKI-
TEL, APPLE, KEN XIN DA, UHANS
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.